



JouleLife JL-001

体組成計取扱説明書 兼 保証書

警告

- ペースメーカーや埋込型除細動器などの医療用機器をご利用の場合、本製品は使用しないでください。
- 妊娠中の方は使用しないでください。
- 滑りやすいところでは使用しないでください。
- お体が濡れた状態では使用しないでください。

使用上のご注意

- 激しい運動直後に測定すると体組成データが正しく表示されない場合があります。
- 18歳未満の方の測定には適しておりません。
- 症状の診断や治療を目的に使用することはできません。

主な仕様

製品名: JL-001

外形寸法: 260x260x23mm

製品モデル: CS20M2

電源: 単4形電池 × 2本

計量範囲: 0.2kg ~ 180kg

アプリ動作環境: iOS10以上 / Android4.3以上

認証



210-116177

RoHS



アプリ連携

体脂肪率や他の体組成数値を確認するために、アプリとの接続が必要となります。QRコードをスキャンし、セットアップガイドをご覧ください。



Setup Guide

本体ディスプレイ表示説明

68.00
✱ kg

正常

表示なし

電源が入っていない
電池切れ

68.00
kg

Bluetooth接続
されていない

Lo

低電力

EEr

過負荷

CAL


準備中

正確な測定値を得るために

正確な測定結果を得るため、ご利用の前に以下をお読みください。


- 本製品は生体電気インピーダンス(BIA)技術を利用しており、測定結果を正確にデータ化するために、できるだけ日中の時間帯かつ、同じ環境の下でご利用ください。
また、以下の場合はご利用をお控えください。
 - ▶ 激しい運動中、または運動直後
 - ▶ 食後
 - ▶ シャワー、お風呂またはサウナの直後
 - ▶ 妊娠中
 - ▶ 発熱中
- 測定時、裸足でまっすぐに立ってください。靴下を履いたままですと正確な測定結果を得られない場合があります。足に付着物がある場合も測定結果に影響がでることがあります。

- 体組成計を平らな硬い床に置き、測定前の体重計の表示が0.0kgであることを確認してください。

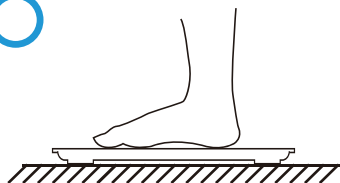

硬い床の上でご利用ください

- 体脂肪率や他の体組成数値を測定するには体重計の上にまっすぐに立ってください。以下の写真のように足裏を電極部分に均一にふれるように立ってください。

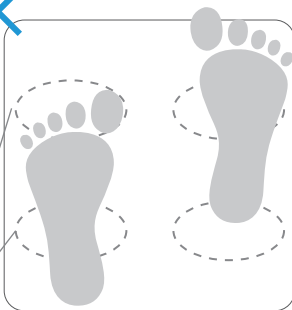

電気伝導エリア

JL-001購入者限定 特典のご案内

このたびは、JouleLifeショップにてお買い上げいただきありがとうございました。現在、JL-001体組成計をお買い上げいただいたお客様全員に以下の特典をお付けしています！

JouleLifeアプリ内で利用できるプライム機能 JouleLife けがのおまもり™ (普通傷害保険)



特典の受け取りは
QRコードからアクセスしてください

アプリプライム機能とは？

JouleLifeアプリ内でプライム会員だけが利用できる便利な機能です。

体重・体脂肪率の2軸グラフで自分のカラダをチェックできたり、健康管理に役立つお得な割引クーポンが届きます。

*iOS端末ご利用者限定の機能です。

JouleLife けがのおまもり™とは？

日常生活の思いがけないケガを補償。
仕事に遊びにがんばるわたしのための保険です。
ケガによる入院・通院を補償します。

※この保険はご職業により、補償内容が変わります。

ご注意

2019年6月現在、「JouleLifeアプリ内で利用できるプライム機能」は、iOS端末をご利用のお客様に限りませんが、「JouleLife けがのおまもり™」は、iOS端末・Android端末いずれのお客様にもご利用いただけます。
「JouleLife けがのおまもり™」は1年間無料でご利用いただけますが、それ以降の継続利用には年額980円の更新費用がかかります。

JouleLife® 保証書

製品名		JouleLife体組成計 JL-001
お客様	お名前	様
	ご住所	〒
	電話番号	
保証期間		新品お買い上げから 1 年間
お買い上げ日		

保証書について

- 本保証書は、右ページの無料修理規定に基づき無料修理を行うことをお約束するものです。
- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証対象は本体です。
- 保証をお受けいただく場合は、本体、外箱、同梱物一式、及びご購入(購入日、購入店を含む)を証明する、ご購入時のレシートまたは同等の書類が必要になります。

お客様へお願い

お手数ですが、お名前・ご住所・電話番号などをわかりやすくご記入ください。
保証書にご記入いただいたお客様のお名前、ご住所、電話番号などの個人情報は、無料修理の対象可否の確認および修理業務の管理のために使用いたしますので、予めご了解願います。

JouleLife 運営事務局 お客様相談室

Email: support.joule@wellnessdata.jp

発売元(保証責任、保証履行)

ウエルネスデータ株式会社 東京都渋谷区広尾1-7-7

無料修理規定

- ① 取扱説明書などの注意書きに基づき、正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、故障した本機を送料お客様負担でお送りいただくことで無料修理させていただきます。ウエルネスデータ株式会社(以下「当社」という)の都合により、当社の指定機種と交換することにより修理にさせていただきます場合がありますが、その場合の保証期間は延長されません。修理の際には、製品とともに本書を当社指定のお問い合わせ窓口にご提示ください。なお、当社指定以外の部品を用いた改造による故障および損傷につきましては、保証対象外となります。
- ② 次の場合には保証期間内でも有料となります。
 - (1) 本書の提示がない場合。
 - (2) 本書にお買い上げ日、お客様名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合。
 - (3) 使用上の誤りによる故障および損傷。
 - (4) 故障の原因が本製品以外の機器にある場合。
 - (5) お買い上げ後の落下、水の侵入および圧迫などによる故障および損傷または落下、水没、水濡れなどの痕跡がある場合。
 - (6) 火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変および公害、塩害、異常電圧など不慮の事故による故障および損傷。
 - (7) 推奨環境以外での利用、また、過酷な条件のもとで使用されて生じた故障、損傷、著しい劣化、機能不全。
 - (8) 当社指定規格以外の電池パックをお使いになり故障した場合。
 - (9) 一般家庭以外（例えば、業務用としての長時間使用、船舶への搭載）に使用された場合の故障および損傷。
 - (10) ご購入（購入日、購入店を含む）を証明するレシートまたは同等の書類の提示がない場合。
- ③ 本製品が不当に修理や分解／改造された場合は修理（有料修理を含む）をお引き受けできない場合があります。
- ④ 本製品内部に水分の付着などによる腐食が認められた場合や破損が著しい場合は修理（有料修理を含む）となる場合があります。
- ⑤ 本製品を指定外の機器と接続した場合、万一発生する事故については責任を負いかねます。
- ⑥ 本製品の故障に起因する付随的損害については責任を負いかねます。
- ⑦ 修理により交換した交換元部品の所有権は有料修理、無料修理を問わず、当社に帰属します。
- ⑧ 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）

※この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて、無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理については当社指定のお問い合わせ窓口へご連絡ください。

※保証期間後の修理につきましては、修理により機能が維持できる場合はご要望により有料修理いたします。ただし、修理部品の不足などにより、お受けできない場合がございます。